

Tunstall Group UK




Lifeline Connect

NAVODILA ZA UPORABO


MKS Elektronski sistemi d.o.o.

LJUBLJANA


Pogled od zgoraj

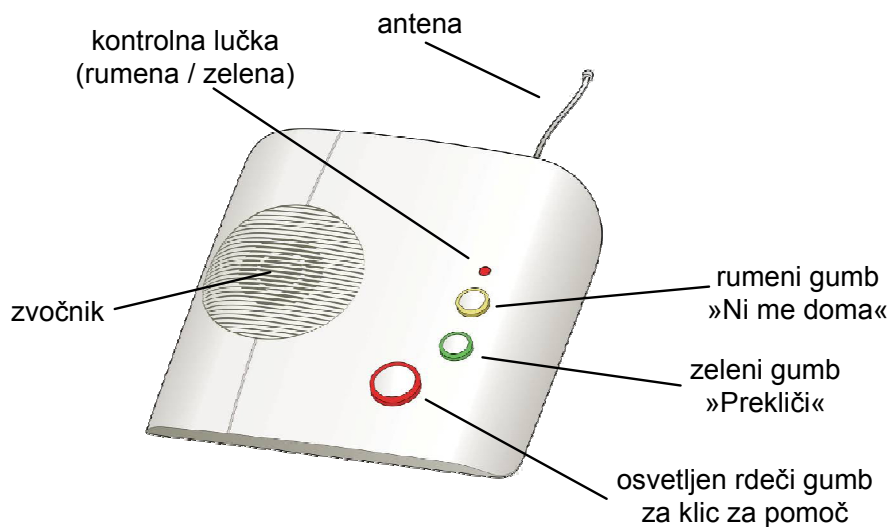

Pogled od spodaj

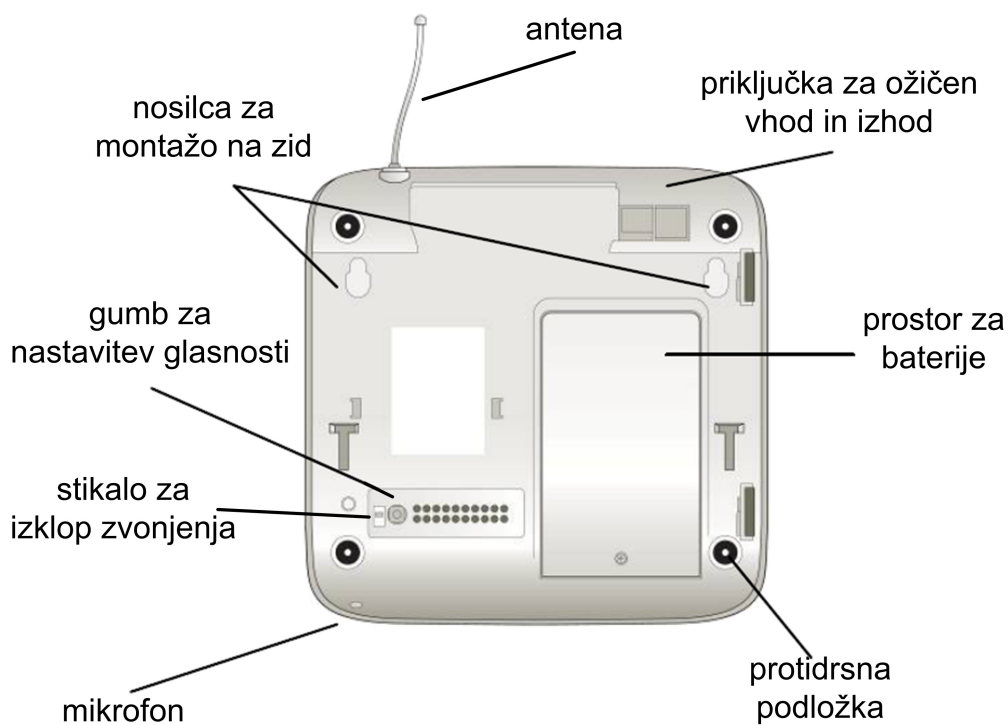

Priključki

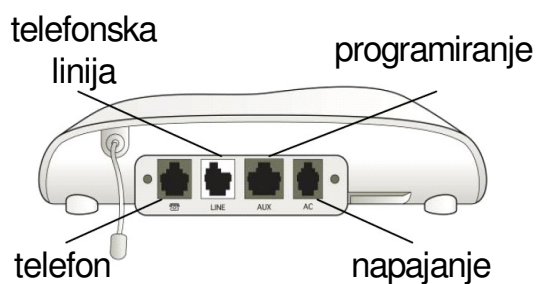

Originalna navodila

Osnova za slovensko verzijo navodil so nemška navodila za uporabo »**Bedienungsanleitung – PiperFon Connect**«, na katero se slovenska navodila na vodila na nekaterih mestih tudi sklicujejo. Ob sklicu je v oklepaju navedena stran v nemških navodilih npr. (str. 11).

Nasvet za vašo varnost

POZOR!

Preden pričnete uporabljati vaš telefon Lifeline Connect, pazljivo preberite ta navodila. Če česar ne razumete, prosite za pomoč in dodatno razlago.

Prosimo, da posebej pazite na naslednje:

- ☞ poseben telefon Lifeline Connect mora biti programiran
- ☞ Lifeline Connect sprejema radijske signale od različnih sprožil npr. detektorja padca, obeska z rdečim gumbom.... Dobro lahko torej deluje le na omejenem območju. Preverite, da bo vaš telefon Lifeline Connect »slišal« sprožila iz vseh delov vašega stanovanja ali hiše.
- ☞ Lifeline Connect je naprava, ki jo uporabljamo v normalnih pogojih kot so npr. v stanovanju. Izogibajte se torej, da bi prišel v stik z vročino ali mrazom, kemikalijami ali prahom. Če se to dogodi, preverite njegovo delovanje. Za pomoč pri preverjanju preberite poglavje o vzdrževanju v teh navodilih.
- ☞ Izogibajte se temu, da bi se poseben telefon Lifeline Connect zmočil. Če se to dogodi, ga obrišite in preverite, ali še vedno deluje. Pritisnite na gumb za pomoč ter tako sprožite klic za pomoč. Za pomoč pri preverjanju preberite poglavje o preizkusu delovanja v teh navodilih.

Kaj je vaš posebni telefon Lifeline

Poseben telefon Lifeline Connect je eden izmed aparatov iz družine Lifeline.

V paketu so poleg telefona še: brezžično sprožilo Amie z vrvico, pas za nošenje brezžičnega sprožila na zapestju, napajalni adapter s kablom in kabel za priklop na telefonsko omrežje

Namestitev telefona Lifeline Connect

Priklop telefona

Telefon Lifeline Connect priključite na električno in telefonsko omrežje. Najbolje je, da to zaupate za to usposobljeni osebi.

Telefon lahko postavite na vodoravno površino (npr. na polico) ali obesite na zid.

Kako sprožiti klic za pomoč

Kadar želite sprožiti klic za pomoč, aktivirajte eno od sprožil:

- gumb na obesku
- gumb na telefonu
- drugo sprožilo npr. stropno potezno stikalo v kopalnici.

Ob klicu bo telefon sam prekinil morebitno telefonsko zvezo (klic iz telefona priklopljenega na telefon Lifeline Connect) in klical na vpisane telefonske številke.

Prekinitev klica za pomoč (str. 17)

Klic za pomoč prekinete tako, da večkrat zaporedoma pritisnete na zeleni gumb na telefonu (večji gumb poleg velikega gumba za klic za pomoč).

Telefoniranje s telefonom Lifeline Connect

Klicanje

S telefona Lifeline Connect je možno klicati samo na številke za klic za pomoč. Klic se sproži z rdečim gumbom na telefonu ali z enim od dodatnih sprožil.

Nekdo vas kliče – sprejmite klic! (str. 30)

Ko telefon Lifeline Connect zazvoni, sprejmite klic tako, da pritisnete enega od naslednjih gumbov:

- zeleni gumb na telefonu
- rdeči gumb na obesku

Klic končate tako, da znova pritisnete:

- zeleni gumb na telefonu
- rdeči gumb na obesku

POZOR!

Če ste sprejeli klic z rdečim gumbom na obesku, morate v primeru, da želite sprožiti klic za pomoč, pritisniti ta gumb dvakrat. S prvim pritiskom končate pogovor, z drugim pa sprožite vaš klic za pomoč.

Nastavitev glasnosti zvočnika (str. 31)

Glasnost nastavite tako da s koničastim predmetom (npr. kemični svinčnik) pritisnete na gumb za nastavitev glasnosti. Vsak pritisk na gumb poveča glasnost za eno

stopnjo. Če je nastavljena največja glasnost bo naslednji pritisk nastavil glasnost na najnižjo stopnjo.

Daljinsko brezžično sprožilo - obesek Amie (str. 9)

Posebnemu telefonu Lifeline Connect pripada daljinsko brezžično sprožilo - obesek Amie. Sprožilo je v vodoodpornem ohišju.

Kadar ste doma, sprožilo vedno nosite s sabo. Ponoči ga dajte na mesto, kjer ga boste lahko dosegli iz postelje npr. na nočno omarico, ali pa ga obesite poleg postelje. Ko želite sprožiti klic za pomoč, pritisnite gumb na sprožilu.

Kontrolna lučka na sprožilu Amie

Ko pritisnete na »rdeči gumb« na brezžičnem sprožilu na njem zagori zelena lučka. Kako gori, je odvisno od stanja baterij v sprožilu.

Kontrolna lučka na sprožilu gori cca 4s

Ko pritisnete na gumb sprožila in lučka zagori za cca 4s, je to znak:

- da ste sprožili klic za pomoč oz. sprejeli telefonski klic
- da so baterije dobre.

Kontrolna lučka na sprožilu utripa

Ko pritisnete na gumb sprožila in lučka utripa, je to znak:

- da ste sprožili klic za pomoč oz. sprejeli telefonski klic in
- da je **baterija oslabela**. Operater v Centeru za pomoč na domu bo vedel, da je baterija slaba. Dogovorite se z njim, da vam bodo zamenjali sprožilo, saj baterije same ni mogoče zamenjati.

Kontrolna lučka na sprožilu se ne prižge

Če pritisnete gumb na sprožilu in se kontrolna lučka ne prižge:

- je baterija v sprožilu iztrošena, ali pa je sprožilo okvarjeno.
- Klic za pomoč **ni bil sprožen**. Pritisnite zato rdeči gumb za klic na pomoč na telefonu. Ko se vzpostavi zveza, povejte svojemu skrbniku, da je potrebno sprožilo zamenjati.

Vzdrževanje telefona Lifeline Connect

Redno čistite svoj telefon Lifeline Connect z mehko krpo, ki jo navlažite z blagim čistilom npr. čistilom za okna. Nikoli ne uporabljajte močnih čistilnih sredstev, kot so alkohol, bencin, razredčilo in podobno!

Preizkus delovanja telefona Lifeline Connect

Vsaj enkrat mesečno preverite delovanje vašega telefona Lifeline Connect. Preizkus poteka v dveh korakih:

- ☞ sprožite klic za pomoč, tako da aktivirate eno od sprožil npr. pritisnete na gumb na detektorju padca.
- ☞ Počakajte, da se oglasi center za pomoč na domu, ki bo klic tudi končal.

Če ste se lahko pogovorili s klicanim, je preverjanje končano. Telefon Lifeline Connect deluje.

Tehnični podatki za telefon Lifeline Connect

Dimenzije:	3,6 x 19,5 x 21,5 cm
Masa:	cca. 650 g
Dolžina. kablov:	3 m
Napetost:	230V/50Hz
Akumulator:	1200mAh, omogoča 30 ur pripravljenosti
Skladnost s standardi:	EN 55022: 1998, EN55024: 1998, EN 50130-4: 1995, EN 300 683:1997, EN 605950: 2000, CE skladen, EN 3000 220-3 Class 1, EN 50134-2, ISO9001:2000

Tehnični podatki za sprožilo -obesek Amie

Dimenzije	1,6 x 3,1 x 5,8 cm
Masa	20 g
Premer gumba za klic	15 mm
Vodoodpornost ohišja	IP 67
Baterija	neizmenljiva Litijeva
Trajanje baterije	20.000 klicev oz. 5 let
Doseg	do 50 m odvisno od ovir – tipično 25 m
Frekvenca delovanja	869,2125 MHz

INFORMACIJE:

MKS Elektronski sistemi d.o.o.
Rožna dol. C.XVII/22b
1111 LJUBLJANA
Tel/Fax 01-256-22-43, 256-22-44
email: info@mks.si
www.mks.si